

**Изделия медицинские электрические**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННО-  
ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ  
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**Часть 7**

**Определение функции передачи модуляции**

Издание официальное

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ)

**ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 668 «Аппараты и оборудование для лучевой диагностики, терапии и дозиметрии»

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 832-ст

**3 Настоящий стандарт** представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 61262-7—95 «Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 7. Определение функции передачи модуляции»

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Определения . . . . .	1
3.1	Используемые термины . . . . .	1
3.2	Степень обязательности требований . . . . .	2
4	Требования . . . . .	3
4.1	Исходные установки . . . . .	3
4.2	Условия работы УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ . . . . .	3
4.3	Входное излучение . . . . .	4
4.4	ТЕСТ-ОБЪЕКТ . . . . .	4
4.5	Измерительное оборудование . . . . .	4
5	Определение ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ . . . . .	4
5.1	Подготовка . . . . .	4
5.2	Измерение . . . . .	4
5.3	Коррекция . . . . .	6
5.4	Определение НИЗКОЧАСТОТНОГО СПАДА . . . . .	6
5.5	Общая точность определения . . . . .	6
6	Представление ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ . . . . .	6
7	Обозначение соответствия . . . . .	7
	Приложение А Указатель терминов . . . . .	8
	Приложение Б Конструкция ТЕСТ-ОБЪЕКТА . . . . .	9
	Приложение В Определение ФЛМА ФПМ-АНАЛИЗАТОРА . . . . .	9
	Приложение Г Библиография . . . . .	10

## Введение

Настоящий стандарт является прямым применением международного стандарта МЭК 61262-7—95 «Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 7. Определение функции передачи модуляции», подготовленного Подкомитетом 62В «Аппараты для лучевой диагностики» Технического комитета МЭК 62 «Изделия медицинские электрические».

В настоящем стандарте приняты следующие шрифтовые выделения:

- методы испытаний — курсив;
- термины, определенные в 3.1 и в приложении А, — прописные буквы.

Для оценки систем изображения часто используют субъективное измерение характеристик, таких, например, как пороговое разрешение. Такие методы не всегда достаточны для оценки характеристик, обеспечиваемых системами изображения.

Линейные пространственно-инвариантные системы формирования изображения могут быть оценены функцией ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ таких систем может быть выражена через ОПТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ПЕРЕДАЧИ (ОФП), которая определяет отклик системы на синусоидальный сигнал как функцию пространственной частоты. ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ (ФПМ), являющаяся модулем ОФП, используется для характеристики ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ УСИЛИТЕЛЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ. Системы считают пространственно-инвариантными в том случае, если ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ не зависит от ее месторасположения. Следует отметить, что УСИЛИТЕЛИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ являются пространственно-инвариантными только в ограниченной области, называемой изопланетарной областью.

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ может быть определена несколькими способами (см., например, [1]):

- через отклик на прямоугольный перепад;
- через преобразование Фурье ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ;
- через преобразование Хенкеля ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ;
- через сканирование изображения щели пространственными фильтрами.

Применение всех методов возможно при условии корректного выполнения. Для простоты в настоящем стандарте представлены два метода: преобразование Фурье ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ, известное как ФРЛ-метод, и метод пространственной фильтрации. Точное определение ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ требует специального оборудования и приспособленных помещений.

Стандарт представляет методы измерения ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ вблизи ЦЕНТРА ВХОДНОГО ПОЛЯ.

В Российской Федерации действует ГОСТ 26141—84 «Усилители рентгеновского изображения медицинских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний». ГОСТ 26141 распространяется на усилители рентгеновского изображения (УРИ), включающие в себя блок преобразования на основе рентгеновского электронно-оптического преобразователя (РЭОП) в защитном кожухе и блок питания электродов РЭОП, а также замкнутую телевизионную систему (ЗТС) с монитором (видеоконтрольным устройством). Параметры качества изображения, нормируемые ГОСТ 26141 и включающие в себя требования к телевизионной системе, оцениваются наблюдателем либо измеряются, как правило, на экране монитора ЗТС.

В МЭК 60788, а также в настоящем стандарте под термином УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (УРИ) понимают устройство для преобразования РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ в усиленное видимое изображение с использованием дополнительного источника энергии для этого усиления, т. е. УРИ — блок преобразования, включающий в себя РЭОП и его блок питания. Параметры изображения измеряют на выходном экране РЭОП с использованием увеличительных оптических устройств.

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ (ФПМ), методы определения которой изложены в настоящем стандарте, характеризуют способность РЭОП передавать пространственные частоты. Для ее измерения требуется сложное дорогостоящее оборудование. Проведение подобных сложных измерений рекомендуется осуществлять в лабораторных условиях предприятия-изготовителя при разработке РЭОП и его периодических испытаниях.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Изделия медицинские электрические**  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ**  
**РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ****Часть 7**  
**Определение функции передачи модуляции**

Medical electrical equipment. Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers. Part 7.  
Determination of the modulation transfer function

Дата введения 2001—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, используемые в медицинской практике в составе диагностических РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Настоящий стандарт устанавливает методы определения ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте используют ссылки на стандарты:

ГОСТ Р 51531—99 (МЭК 61262-4—94) Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 4. Определение дисторсии изображения

ГОСТ Р МЭК 60336—99 Излучатели медицинские рентгенодиагностические. Характеристики фокусных пятен

ИСО 9334—95\* Оптика и оптические приборы. Оптическая передаточная функция. Определение и математические соотношения

МЭК 60788—84\* Медицинская радиационная техника. Термины и определения

**3 Определения****3.1 Используемые термины**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями\*\*:

3.1.1 **УРИ: ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.**

3.1.2 **ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ:** Плоскость, перпендикулярная к оси симметрии УРИ и касательная части его корпуса, максимально выступающей в сторону ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ.

3.1.3 **ВХОДНОЕ ПОЛЕ:** Область ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ, которая может быть использована для передачи РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ при установленных условиях.

3.1.4 **РАЗМЕР ВХОДНОГО ПОЛЯ:** Диаметр поля на ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ, которое может быть использовано для передачи РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ при нормированном РИВ (см. 3.1.5). Для УРИ с более чем одним режимом увеличения РАЗМЕР ВХОДНОГО ПОЛЯ УРИ для каждого режима увеличения должен соответствовать тому же диаметру ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ УРИ, что и для наибольшего РАЗМЕРА ВХОДНОГО ПОЛЯ.

\* Международные стандарты — во ВНИИКИ Госстандарта России.

\*\* Наряду с нижеприведенными терминами применяют термины по МЭК 60788 (см. приложение А). В тех случаях, когда наименование термина, определенного в 3.1.1—3.1.21, совпадает с приведенным в МЭК 60788, преимущество имеет определение термина в настоящем стандарте.

**3.1.5 РАССТОЯНИЕ ИСТОЧНИК — ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ (РИВ):** Расстояние между **ФОКУСНЫМ ПЯТНОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ** и **ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ УРИ**.

**3.1.6 ЦЕНТР ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:** Центр наименьшей окружности, описывающей **ВЫХОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ**.

**3.1.7 ЦЕНТР ВХОДНОГО ПОЛЯ:** Точка **ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ**, которая изображается в **ЦЕНТРЕ ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**.

**3.1.8 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ:** Линия, перпендикулярная к **ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ**, проходящая через **ЦЕНТР ВХОДНОГО ПОЛЯ**.

**3.1.9 УВЕЛИЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ** (как характеристика УРИ): Отношение длины в **ВЫХОДНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ** к реальной длине небольшого объекта, расположенного во **ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ** симметрично **ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ**.

**3.1.10 ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ (ФРТ):** Нормальное распределение (распределение Гаусса) интенсивности в изображении точечного источника (см. ИСО 9334).

**3.1.11 ИЗОПЛАНЕТАРНАЯ ОБЛАСТЬ:** Область, в которой **ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ** остается постоянной в пределах заданной точности.

**3.1.12 ЛИНЕЙНОСТЬ:** Свойство системы формирования изображений, состоящее в том, что изображение взвешенной суммы объектов идентично такой же взвешенной сумме изображений отдельных объектов.

**3.1.13 ЛИНЕЙНАЯ ОБЛАСТЬ:** Область входных сигналов, при которых система изображения обеспечивает **ЛИНЕЙНОСТЬ** в пределах заданной точности (см. ИСО 9334).

**Примечание** — Область входных сигналов, определяющих **ЛИНЕЙНУЮ ОБЛАСТЬ** в системах изображения, следует задавать минимальным и максимальным уровнями.

**3.1.14 ОПТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ (ОФП):** Двумерное преобразование **Фурье ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ** систем формирования изображения (см. ИСО 9334).

**Примечание** — Для достоверности **ОПТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ** необходимо, чтобы система формирования изображения работала в **ЛИНЕЙНОЙ ОБЛАСТИ** и чтобы сохранялась **ИЗОПЛАНЕТАРНАЯ ОБЛАСТЬ**.

**3.1.15 ОДНОМЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ (1-ОФП):** Сечение **ОПТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ**, проходящее через начало координат в заданной ориентации.

**3.1.16 ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИЙ (ФРЛ):** Нормальное распределение (распределение Гаусса) интенсивности изображения линейного источника некогерентного излучения. **ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИЙ** существует только в изопланетарной области (см. ИСО 9334).

**Примечание** — Преобразование Фурье **ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИЙ** является **ОДНОМЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ**, ориентированной перпендикулярно к линейному источнику **ИЗЛУЧЕНИЯ**.

**3.1.17 ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ (ФПМ):** Модуль **ОДНОМЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ**.

**Примечание** — **ФПМ** определена в соответствии с ИСО 9334 как модуль **ОДНОМЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ**. Такое определение наиболее применимо для настоящего стандарта.

**3.1.18 ФПМ-АНАЛИЗАТОР:** Оборудование, включающее в себя фокусирующую оптику и логический вычислитель, способное осуществлять измерение **ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ**.

**3.1.19 ОПТИМАЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА:** Установка таких значений фокусирующих потенциалов УРИ, которые позволяют получить максимальное интегральное значение кривой **ФПМ** для данной ориентации щели.

**Примечание** — Указанные значения фокусирующих потенциалов выбирают для уменьшения погрешности; эти значения могут несколько отличаться от значений, имеющих место при практическом использовании УРИ.

**3.1.20 НИЗКОЧАСТОТНЫЙ СПАД (НЧС):** Разность между единицей и значением **ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ** на частоте, близкой к нулевой пространственной частоте.

**Примечание** — В современных УРИ присутствует существенное вуалирование. Его характеризует крутой спад кривой **ФПМ** при значениях пространственной частоты, близких к нулю. В настоящем стандарте пространственная частота, при которой определяют **НЧС**, выбрана равной  $0,1 \text{ мм}^{-1}$ .

**3.1.21 СВЕТОВОЙ ДЕТЕКТОР:** Детектор излучения, чувствительный к видимому излучению (свету).

### **3.2 Степень обязательности требований**

В настоящем стандарте использованы следующие вспомогательные термины:

- **должен:** Соответствие требованиям обязательно для соответствия настоящему стандарту.

анализирующую плоскость анализатора, представляющую собой пространственный фильтр ФПМ-АНАЛИЗАТОРА. Пространственный фильтр расположен таким образом, чтобы его ориентация была параллельна оси по длине изображения щели.

Интенсивность света, передаваемую пространственным фильтром, измеряют с помощью СВЕТОВОГО ДЕТЕКТОРА, например фотоумножителя.

Фильтр по крайней мере один цикл продвигается в плоскости анализатора в направлении, перпендикулярном к оси по длине изображения щели. Максимальные и минимальные значения интенсивности света регистрируют.

С учетом того, что пространственные фильтры являются синусоидальными и изменяются при ПРОХОЖДЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ от полной прозрачности до полной непрозрачности, ФУНКЦИЮ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ ФПМ ( $f$ ), измеряемую на определенной частоте пространственного фильтра  $f_p$ , рассчитывают по формуле

$$\Phi_{\text{ПМ}}(f) = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}},$$

где  $I$  — интенсивность света.

Эти измерения должны быть повторены для всех требуемых частот.

*Примечание* — Вместо различных пространственных фильтров для определения ФПМ на разных частотах может быть использован фильтр с изменяющейся пространственной частотой.

#### б) ФРЛ-метод

Изображение щели с ВЫХОДНОГО ЭКРАНА с помощью линз или системы линз проецируется на МИШЕНЬ двумерной (телевизионной) камеры. Ориентация щели по отношению к камере должна быть такой, чтобы изображение щели было параллельно столбцу матрицы камеры.

При использовании двумерной камеры ФУНКЦИЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ определяют по цифровым изображениям с помощью суммирования всех элементов (точек столбца), на которые попадает проецируемое ВЫХОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Это означает, что в изображении щели на ее краю для получения ФРЛ имеется меньшее число точек, чем в центре.

Если динамический диапазон входного устройства ФПМ-АНАЛИЗАТОРА ограничен [см. 4.5, перечисление д)], ФРЛ должна быть определена более чем по одному измерению, т. е. для различных интенсивностей. Эти измерения могут быть пропорционально просуммированы.

#### Примечания

1 Для измерения низкочастотной части ФПМ полезно иметь более широкую щель, чем для высокочастотной части ФПМ [см. 4.4, перечисление а)]. Когда регистрируют хвостовую часть ФПМ, может быть использован узкий нейтральный фильтр, чтобы уменьшить слишком большую интенсивность центральной части ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.

2 Если необходимо корректировать темновой ток [см. 4.5, перечисление д)], это может привести к негативному влиянию на результаты измерения хвостовой части ФРЛ. Эти негативные явления рекомендуется устранять с помощью пространственного сглаживания.

Измеряемую ФУНКЦИЮ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ ФПМ<sub>н</sub> определяют с помощью преобразования Фурье ФРЛ.

Пространственное частотное разрешение  $\Delta f$ , мм<sup>-1</sup>, измерений может быть представлено формулой

$$\Delta f = \frac{1}{NX},$$

при этом:

$$f_{\text{min}} = (\text{РВП})^{-1} \text{ и}$$

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{4X},$$

где  $N$  — число измеряемых точек (пиксел) по строке;

$X$  — шаг дискретизации, отнесенный ко входной плоскости, мм;

$f_{\text{min}}$  — минимально регистрируемая пространственная частота, мм<sup>-1</sup>;

РВП — размер входного поля, мм;

$f_{\text{max}}$  — максимально используемая пространственная частота (половина частоты Найквиста), мм<sup>-1</sup>.

Если  $\Phi\text{ПМ}_И$  при  $f_{\text{max}}$  превышает 0,02, изображение щели дискретно передается неточно, что обусловлено ограничением разрешения камеры. Второе измерение должно быть проведено при более высоком оптическом увеличении.

в) Шкала пространственной частоты должна быть отнесена (пересчитана) к ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ. Когда это необходимо, шкала пространственной частоты должна быть пересчитана с учетом УВЕЛИЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ и увеличения линз.

г)  $\Phi\text{ПМ}$  на нулевой пространственной частоте равна 1,00 по определению.

### 5.3 Коррекция

На измеряемую ФУНКЦИЮ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ  $\Phi\text{ПМ}_И$  влияют  $\Phi\text{ПМ}$  ТЕСТ-ОБЪЕКТА  $\Phi\text{ПМ}_Т$ , а также оптика  $\Phi\text{ПМ}$ -АНАЛИЗАТОРА  $\Phi\text{ПМ}_А$  и  $\Phi\text{ПМ}$  ФОКУСНОГО ПЯТНА  $\Phi\text{ПМ}_Ф$ . Чтобы определить  $\Phi\text{ПМ}$  УРИ —  $\Phi\text{ПМ}_Х$ , все эти влияния должны быть учтены.

а)  $\Phi\text{ПМ}_Х$  рассчитывают по формуле

$$\Phi\text{ПМ}_Х = \Phi\text{ПМ}_И \frac{1}{\Phi\text{ПМ}_Т \cdot \Phi\text{ПМ}_А \cdot \Phi\text{ПМ}_Ф};$$

б)  $\Phi\text{ПМ}_Т$  определяют по формуле

$$\Phi\text{ПМ}_Т(f) = \frac{\sin(\pi \cdot d \cdot f)}{\pi \cdot d \cdot f},$$

где  $f$  — пространственная частота;

$d$  — ширина щели.

Обе величины приведены к ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ.

Такая аппроксимация допустима, если ширина щели существенно меньше ее длины.

в)  $\Phi\text{ПМ}$  АНАЛИЗАТОРА, включающая в себя оптику, может быть взята из ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ на  $\Phi\text{ПМ}$ -АНАЛИЗАТОР. В альтернативном случае  $\Phi\text{ПМ}_А$  может быть измерена отдельно (см. приложение В).

г) Если  $\Phi\text{ПМ}$  была измерена более чем в одной частотной области, т. е. в низкочастотной и высокочастотной областях, участки должны быть совмещены после коррекции  $\Phi\text{ПМ}_А$  отдельно для каждого участка. Масштабное совмещение высокочастотного и низкочастотного участков должно быть проведено при частоте или области частот, лежащей между границами этих участков.

д)  $\Phi\text{ПМ}$  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ФОКУСНОГО ПЯТНА должна быть определена в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60336 в случае необходимости коррекции  $\Phi\text{ПМ}_Ф$  [см. 4.3, перечисление б)]. В остальных случаях  $\Phi\text{ПМ}_Ф$  должна быть принята равной 1,00.

е) Шкала пространственной частоты должна быть соотнесена с ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ УРИ [см. 5.2, перечисления б), в)].

ж) Результирующая  $\Phi\text{ПМ}_Ф$ , используемая для коррекции, должна более чем на 0,5 превышать анализируемую частотную область.

### 5.4 Определение НИЗКОЧАСТОТНОГО СПАДА

$\text{НЧС}$  рассчитывают по формуле

$$\text{НЧС} = 1,00 - \Phi\text{ПМ},$$

где  $\Phi\text{ПМ}$  — величина, определяемая при значении частоты 0,1 мм<sup>-1</sup>.

### 5.5 Общая точность определения

Результирующая  $\Phi\text{ПМ}$  должна быть определена с погрешностью не хуже 0,02 для всей приведенной ко входу области пространственных частот.

Примечание — Обратите внимание на документ о точности измерения ОФП в ИСО/ТК 172/ПК 1 [2].

## 6 Представление ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ

а) Представление  $\Phi\text{ПМ}$  должно быть следующим:

- данные о УРИ, т. е. общий тип, наименование или номер модели;

-  $\Phi\text{ПМ}$ , полученная из ФРЛ, должна быть представлена линейным графиком по двум осям, начинающимся с нуля. Пространственные частоты, выраженные в мм<sup>-1</sup> (или см<sup>-1</sup>), должны быть приведены к ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ;

- числовое значение ФРЛ.

б) Без специальных указаний представленные данные относятся к наибольшему РАЗМЕРУ ВХОДНОГО ПОЛЯ.



- **рекомендуется:** Соответствие требованиям рекомендовано, но необязательно для соответствия настоящему стандарту.

- **может:** Описание допустимых путей достижения соответствия настоящим требованиям.


- **установленный:** Обозначение определенных данных, приведенных в настоящем стандарте или в стандартах, на которые даны ссылки, и обычно относящихся к конкретным условиям работы и испытаний или к значениям, по которым определяют соответствие (см. МЭК 60788, определение МР-74-01).

- **нормируемый:** Обозначение определенных данных, указываемых ИЗГОТОВИТЕЛЕМ в СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ (далее — ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ) ДОКУМЕНТАХ на аппарат, касающихся, главным образом, его назначения, параметров, условий эксплуатации или испытаний на соответствие (см. МЭК 60788, определение МР-74-02).

- **предназначенный:** Используется для характеристики оборудования, устройств или их составляющих: определяет их назначение или цель применения изделия.

## 4 Требования

В настоящем стандарте установлены методы определения ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ УРИ с помощью анализатора со световой щелью. В первом методе изображение сканируется с помощью одномерного пространственного фильтра — результат выдается непосредственно в виде ФПМ. Во втором методе результат выдается в виде ФРЛ; ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ получается с помощью двумерной камеры. ФПМ получают путем преобразования Фурье ФРЛ. В состав испытательного оборудования должен быть включен ФПМ-АНАЛИЗАТОР (см. рисунок 1).

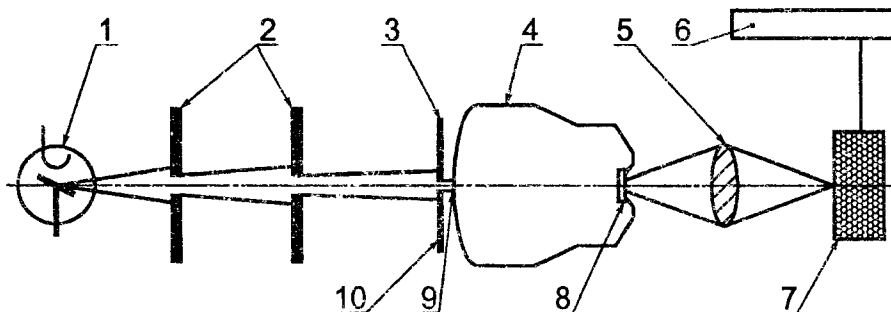

1 — РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА; 2 — ДИАФРАГМА; 3 — ТЕСТ-ОБЪЕКТ; 4 — УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (испытуемый); 5 — фокусирующие линзы; 6 — ФПМ-АНАЛИЗАТОР; 7 — в плоскости анализатора: пространственный фильтр или мишень камеры; 8 — ВЫХОДНОЙ ЭКРАН; 9 — ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ; 10 — плоскость щели

Рисунок 1 — Измерительная установка

### 4.1 Исходные установки

а) РИВ должно быть равно  $(100 \pm 1)$  см.

б) **ФОКУСНОЕ ПЯТНО РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ** должно находиться на центральной оси. Отмеченные в перечислениях *в*), *г*) и *д*) искажающие факторы не должны оказывать влияния на полученный результат больше, чем общая допустимая точность измерения (см. 5.5).

в) Магнитные и электрические паразитные поля. Испытательное оборудование должно быть изготовлено из хорошо экранированных и немагнитных материалов.

г) Паразитный свет.

д) Механическая нестабильность испытательного оборудования. Вибрация даже с такой малой амплитудой, как 10 мкм, может исказить результат.

### 4.2 Условия работы УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

а) УРИ должен работать в условиях **НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**, нормированных ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, кроме фокусировки УРИ. Должна быть обеспечена **ОПТИМАЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА** по центру УРИ.

б) Не должно быть ни **ОТСЕИВАЮЩЕГО РАСТРА**, ни защитного покрытия.

в) В случае многопольного УРИ измерение должно быть проведено для наибольшего нормированного **ВХОДНОГО ПОЛЯ**. Измерения для других **ВХОДНЫХ ПОЛЕЙ** необязательны.

г) Пульсация напряжения на электродах УРИ не должна превышать 0,1 %.

д) УРИ должен работать в своей **ЛИНЕЙНОЙ ОБЛАСТИ**.

**4.3 Входное излучение**

а) КАЧЕСТВО ИЗЛУЧЕНИЯ должно быть обеспечено работой РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ при АНОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ  $(50 \pm 2)$  кВ и соответствовать СЛОЮ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ  $(2,0 \pm 0,2)$  мм алюминия (чистотой 99,9 %). Это соответствует ОБЩЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ приблизительно 3 мм по алюминиевому эквиваленту.

б) НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОКУСНОГО ПЯТНА в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60336 должно быть 0,6 или менее.

Если это условие не может быть выполнено, например из-за слишком низкого сигнала для измерения ФПМ, должна быть проведена необходимая коррекция с учетом фактически используемого ФОКУСНОГО ПЯТНА. В этом случае фактически используемое НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОКУСНОГО ПЯТНА должно быть указано при описании результатов.

в) Колебания интенсивности рентгеновского излучения не должны ухудшать результат измерений более чем на 2 % фактического значения.

**4.4 ТЕСТ-ОБЪЕКТ**

а) ТЕСТ-ОБЪЕКТ представляет собой щель, ширина которой должна быть меньше или равна  $0,5 \times f_{\max}^{-1}$ , где  $f_{\max}$  — максимальная анализируемая пространственная частота,  $\text{мм}^{-1}$ .

б) Ширина щели не должна отличаться более чем на 5 % по всей длине щели.

в) Длина щели не должна приводить к выходу из ИЗОПЛАНЕТАРНОЙ ОБЛАСТИ. Длина 10 мм обычно допустима для практического использования.

г) Значение энергии РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, попадающей через УРИ на выходную плоскость с изображением щели, должно составлять менее 1 % общей энергии РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, попадающей на УРИ (см. приложение Б).

**4.5 Измерительное оборудование**

а) Входное изображение на ВЫХОДНОМ ЭКРАНЕ следует анализировать с помощью ФПМ-АНАЛИЗАТОРА таким образом, чтобы обеспечить корректное определение низкочастотной части ФПМ.

б) Если используют более чем одну линзу или систему линз, требованиям перечисления а) должна соответствовать по крайней мере одна из линз или систем линз.

*Примечание* — Более чем одна линза может быть использована, чтобы увеличить число отсчетов или частотный диапазон ФПМ.

в) ФПМ-АНАЛИЗАТОР должен обеспечивать выравнивание относительно изображения щели.

г) Входное устройство ФПМ-АНАЛИЗАТОРА должно обеспечивать линейный отклик. Для метода пространственной фильтрации входное устройство представляет собой СВЕТОВОЙ ДЕТЕКТОР, например фотоумножитель. Для ФРЛ-метода входное устройство представляет собой двумерную камеру, например телевизионную ПЗС-камеру (ПЗС — прибор с зарядовой связью).

д) При ФРЛ-методе должна быть предусмотрена возможность измерения уровней яркости, отличающихся один от другого на шесть порядков. Если такой динамический диапазон не перекрывается входным устройством ФПМ-АНАЛИЗАТОРА, измерение должно быть сделано более чем за одну операцию. Если присутствует темновой ток сигнала, его рекомендуется измерять отдельно и вводить коррекцию. Если используют ПЗС-камеру, настоятельно рекомендуется охлаждать ПЗС-матрицу для снижения шума и расширения динамического диапазона.

Рекомендуется также использовать камеру с разрешением по крайней мере 1000 точек на строку.

**5 Определение ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ****5.1 Подготовка**

а) ТЕСТ-ОБЪЕКТ должен быть размещен в плоскости, параллельной ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, насколько возможно близко к последней, но не далее чем на расстоянии 10 мм от нее.

*Примечание* — Ротационная симметрия современных электронно-оптических преобразователей, применяемых в УРИ, является такой, что нет потребности в угловой ориентации ТЕСТ-ОБЪЕКТА.

б) УВЕЛИЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ должно быть определено с погрешностью не менее 1 %.

*Примечание* — В ГОСТ Р 51531 дан метод определения УВЕЛИЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ.

в) Центр ТЕСТ-ОБЪЕКТА должен лежать на ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ.

**5.2 Измерение**

а) Метод пространственной фильтрации

Изображение с ВЫХОДНОГО ЭКРАНА с помощью линз или системы линз проецируется на

## 7 Обозначение соответствия

Если требуется подтвердить определение **ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ УСИЛИТЕЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ** в соответствии с настоящим стандартом, то должно быть указано:

- **ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ** по ГОСТ Р МЭК 61262.7—99

или

- **ФПМ** по ГОСТ Р МЭК 61262.7—99.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

## Указатель терминов

В настоящем приложении для каждого термина указаны соответствующий номер пункта раздела «Определение» настоящего стандарта (3.1) или обозначение термина по МЭК 60788 (MP-. . .). Знаками «-» и «с» отмечены термин без определения и сокращенный термин соответственно.

<b>АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b> . . . . .	MP-36-02
<b>ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (СВЕТ)</b> . . . . .	MP-11-01-
<b>ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ</b> . . . . .	3.1.2
<b>ВХОДНОЕ ПОЛЕ</b> . . . . .	3.1.3
<b>ВЫХОДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ УРИ</b> . . . . .	MP-32-49
<b>ВЫХОДНОЙ ЭКРАН УРИ</b> . . . . .	MP-32-48
<b>ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ФОКУСНОЕ ПЯТНО</b> . . . . .	MP-20-12
<b>ДЕТЕКТОР ИЗЛУЧЕНИЯ</b> . . . . .	MP-51-01
<b>ДИАФРАГМА</b> . . . . .	MP-37-29
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> . . . . .	MP-85-03-
<b>ИЗЛУЧЕНИЕ</b> . . . . .	MP-11-01
<b>ИЗОПЛАНЕТАРНАЯ ОБЛАСТЬ</b> . . . . .	3.1.11
<b>ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ</b> . . . . .	MP-20-01
<b>КАЧЕСТВО ИЗЛУЧЕНИЯ</b> . . . . .	MP-13-28
<b>ЛИНЕЙНАЯ ОБЛАСТЬ</b> . . . . .	3.1.13
<b>ЛИНЕЙНОСТЬ</b> . . . . .	3.1.12
<b>МИШЕНЬ</b> . . . . .	MP-20-08
<b>НИЗКОЧАСТОТНЫЙ СПАД (НЧС)</b> . . . . .	3.1.20
<b>НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОКУСНОГО ПЯТНА</b> . . . . .	MP-20-14
<b>НОРМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b> . . . . .	MP-82-04
<b>НОРМИРУЕМЫЙ</b> . . . . .	MP-74-02
<b>ОБЩАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ</b> . . . . .	MP-13-48
<b>ОДНОМЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ (1-ОФП)</b> . . . . .	3.1.15
<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА</b> . . . . .	3.1.19
<b>ОПТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ (ОФП)</b> . . . . .	3.1.14
<b>ОТСЕИВАЮЩИЙ РАСТР</b> . . . . .	MP-32-06
<b>ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ</b> . . . . .	MP-84-02
<b>ПРОНИКНОВЕНИЕ</b> . . . . .	MP-12-10
<b>РАЗМЕР ВХОДНОГО ПОЛЯ</b> . . . . .	3.1.4
<b>РАССТОЯНИЕ ИСТОЧНИК — ВХОДНАЯ ПЛОСКОСТЬ (РИВ)</b> . . . . .	3.1.5
<b>РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА</b> . . . . .	MP-22-03
<b>РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ</b> . . . . .	MP-20-20
<b>РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ</b> . . . . .	MP-11-01
<b>РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ</b> . . . . .	MP-32-01
<b>СВЕТОВОЙ ДЕТЕКТОР</b> . . . . .	3.1.21
<b>СЛОЙ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ</b> . . . . .	MP-13-42
<b>СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) ДОКУМЕНТЫ</b> . . . . .	MP-82-01
<b>ТЕСТ-ОБЪЕКТ</b> . . . . .	MP-71-04
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ</b> . . . . .	3.1.9
<b>УРИ</b> . . . . .	3.1.1
<b>УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (УРИ)</b> . . . . .	MP-32-39
<b>УСТАНОВЛЕННЫЙ</b> . . . . .	MP-74-01
<b>ФОКУСНОЕ ПЯТНО</b> . . . . .	MP-20-13с
<b>ФПМ-АНАЛИЗАТОР</b> . . . . .	3.1.18
<b>ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ (ФПМ)</b> . . . . .	3.1.17
<b>ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ (ФРЛ)</b> . . . . .	3.1.16
<b>ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ (ФРТ)</b> . . . . .	3.1.10
<b>ЦЕНТР ВХОДНОГО ПОЛЯ</b> . . . . .	3.1.7
<b>ЦЕНТР ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> . . . . .	3.1.6
<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ</b> . . . . .	3.1.8
<b>ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> . . . . .	MP-32-40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное)**Конструкция ТЕСТ-ОБЪЕКТА**

При конструировании ТЕСТ-ОБЪЕКТА целесообразно использовать один или более слоев тяжелых элементов, таких как вольфрам, платина или уран. Толщины ТЕСТ-ОБЪЕКТА для достаточного поглощения РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ будут зависеть от конструкции и используемых элементов и на практике составят 1 мм или более.

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное)**Определение  $\Phi ПМ_A$  ФПМ-АНАЛИЗАТОРА**

**Примечание** — Обратите внимание на документ о точности измерения ОФП [2].

Узкую оптическую щель размерами  $0,020 \times 10$  мм устанавливают перед входом ФПМ-АНАЛИЗАТОРА, оборудованного для измерений фокусирующей оптикой. Затем изображение щели фокусируют. Щель рекомендуется подсвечивать некогерентным светом, подобным генерируемому ВЫХОДНЫМ ЭКРАНОМ УРИ, или светом, имеющим такое же спектральное распределение. Затем измеряют ФПМ, как описано в 5.2.

$\Phi ПМ_A$ , которая может быть определена таким образом, должна быть откорректирована на  $\Phi ПМ_T$  оптической щели.  $\Phi ПМ_A$  должна быть определена для каждой используемой оптики. Для расчета по 5.3 шкала пространственной частоты должна быть приведена к ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ УРИ. Так как увеличение в центре зависит от типа УРИ, более удобно для практических расчетов привести значения частот к плоскости ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ УРИ, а затем перемасштабировать на ВХОДНУЮ ПЛОСКОСТЬ. Перемасштабирование ВЫХОДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ УРИ на плоскость оптической щели требуется, когда значение увеличения фокусирующей оптики отличается от единицы. Увеличение, присущее ФПМ-АНАЛИЗАТОРУ, определяют отдельно.

Если УРИ имеет стеклянное выходное окно, т. е. плоскость ИЗОБРАЖЕНИЯ находится внутри УРИ, то при определении  $\Phi ПМ_A$  подобное стекло рекомендуется расположить между узкой оптической щелью и фокусирующей оптикой. Добавляемое выходное стекло должно быть антиотражающим с обеих сторон. Влияние добавочного выходного стекла может быть существенно для высокоапертурных линз.

**Примечание** — В случае использования высококачественной фокусирующей оптики коррекция  $\Phi ПМ_A$  обычно мала. Использование именно такой оптики предпочтительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
(справочное)

**Библиография**

- [1] Вильямс С. и Векланд О. Введение в определение оптической функции передачи. — Нью-Йорк: Джон Вайли и сыновья, 1989
- [2] Оптика и оптические инструменты. Точность определения функции передачи модуляции. Проект международного стандарта ИСО 11421

УДК 615.84.001.4:006.354

ОКС 19.100

Е84

ОКП 94 4220

Ключевые слова: медицинские электрические изделия, электронно-оптический усилитель рентгеновского изображения, функция передачи модуляции

---

Редактор *Л.В. Афанасенко*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 04.07.2000. Подписано в печать 08.09.2000. Усл.печ.л. 1,86. Уч.-издл. 1,20.  
Тираж 177 экз. С 5842. Зак. 801.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102